

Teca per interni per defibrillatori DAE con allarme

Armadietti per Defibrillatori DAE – Serie AIVIA by Pyrescom

Gli armadietti per Defibrillatori DAE della serie AIVIA by Pyrescom, interamente progettati in Francia, sono attualmente i cabinet più diffusi per la collocazione dei DAE in ambiente pubblico, con oltre 30.000 unità vendute in tutta Europa.

Aivia 100

Scocca in ABS e coperchio in policarbonato semitrasparente conferiscono a questa teca la massima resistenza e leggerezza.

AIVIA 100 è stata progettata per resistere nel tempo garantendo la continua protezione ed efficienza del defibrillatore posto al suo interno.

- Sportello in policarbonato e scocca in ABS ultra-resistenti
- Illuminazione a led giorno/notte ad attivazione automatica tramite sensore di luminosità
- Allarme visivo 80dB con led di colore rosso che si attivano all'apertura dello sportello
- Alimentazione a batterie (4 LR20 in dotazione)
- Accesso al defibrillatore DAE protetto da sigilli in plastica
- Adesivo frontale con indicazione del simbolo AED/DAE e istruzioni di soccorso
- Fori di predisposizione al montaggio a muro



Le teche per interni AIVIA, al contrario dei comuni armadietti pensati per altri utilizzi e spesso destinati al contenimento dei defibrillatori, sono state progettate per fornire la giusta visibilità e la massima funzionalità.

Non possono arrugginire ed offrono una resistenza all'usura senza pari nel tempo, specialmente se posizionati in ambienti umidi (piscine, palestre etc.)

I colori scelti, internazionalmente riconosciuti ed utilizzati per segnalare la presenza di un defibrillatore, il particolare ed esclusivo design e gli acronimi AED/DAE posti sia frontalmente che lateralmente permettono una facile ed immediata individuazione della postazione.



Aivia 100

Caratteristiche


- ✓ Sistema automatico di illuminazione a LED notte / giorno
- ✓ Accesso non autorizzato al DAE verificabile tramite sigilli plastificati
- ✓ Allarme sonoro da 80dB, alimentato dalle batterie
- ✓ Temperatura e umidità di funzionamento: -20°+55°, 95% senza condensazione
- ✓ Da posizionare in ambienti interni

Posizionamento

Aivia 100 viene alimentata da 4 batterie LR20 fornite in dotazione. Può pertanto essere collocata in ambiti pubblici garantendo la massima sicurezza.

Dimensioni e Peso

Altezza:423 mm, Larghezza 388 mm, Profondità 201 mm
Kg. 3,5

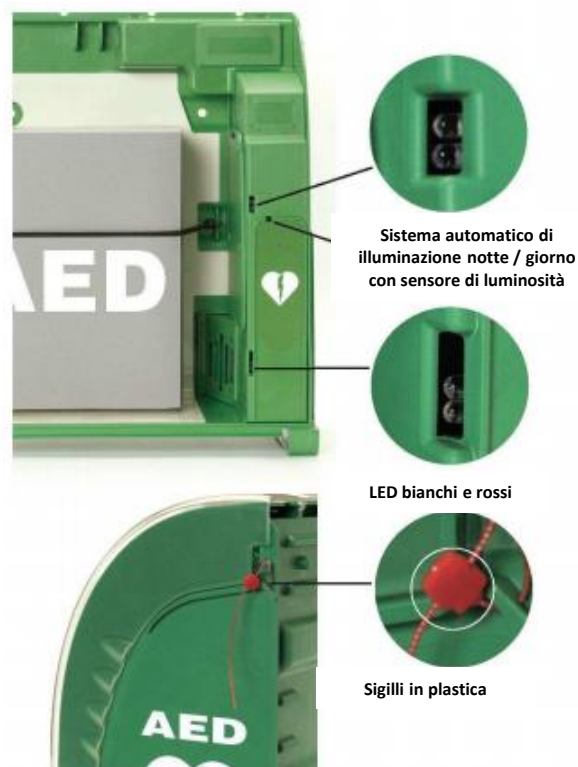

Sistema automatico di illuminazione notte / giorno con sensore di luminosità

LED bianchi e rossi

Sigilli in plastica



Elastico di fissaggio defibrillatore

Elemento riscaldante

Fori di fissaggio alla parete

Distributore autorizzato: **EMIMED S.r.l.**