

Ready-Heat II™

Coperta autoriscaldante monouso studiata specificatamente per il trattamento delle situazioni di shock ed ipotermia extraospedaliere



©SP SERVICES

Realizzata in tessuto non tessuto, contiene elementi riscaldanti che reagendo con l'ossigeno presente nell'aria sviluppano calore

Nell'arco di 8-10 minuti raggiunge una temperatura minima di 37,5°

In 15-30 minuti raggiunge poi la temperatura di regime, garantendo riscaldamento per almeno 6 ore

Ready-Heat II™ si utilizza in totale assenza di alimentazione esterna, sia a corrente che a batteria, permettendone l'impiego nelle più svariate situazioni di soccorso

Ready-Heat II™ ... dove il calore è necessario

Ready-Heat II™


Appositamente progettata e realizzata negli Stati Uniti, Ready-Heat II si presenta come novità assoluta per il trattamento immediato dello shock e dell'ipotermia in ambito extraospedaliero.

Estremamente maneggevole per l'operatore, dato il minimo ingombro quando imbustata, diventa una coperta di 86 x 122 cm. una volta aperta, adatta pertanto ad ogni tipo di necessità.



Grafico della temperatura di riscaldamento di ReadyHeatII

Temperatura rilevata in corrispondenza di un elemento riscaldante.
Prova effettuata ad una temperatura ambiente di 21 °C

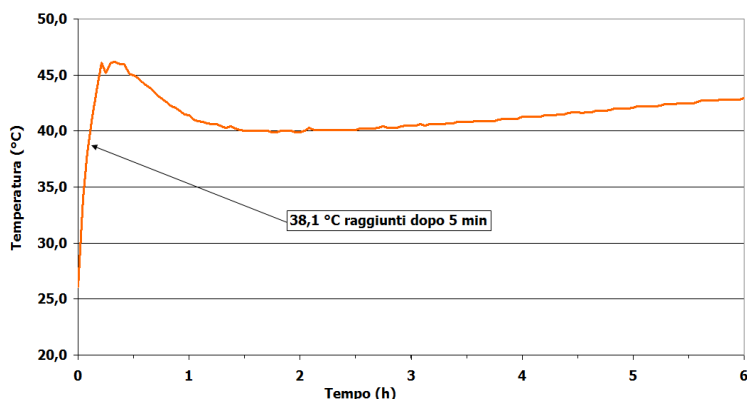

Ready-Heat II è incredibilmente efficace per velocità nel raggiungimento della temperatura operativa e nel mantenimento della stessa; grazie ai 12 pannelli riscaldanti, contenuti in apposite tasche all'interno della coperta.

Ready-Heat II è in grado, una volta estratta dall'imballo ed esposta all'aria, di raggiungere nell'arco di 8-10 minuti una temperatura di 37,5° C e di mantenere per almeno 6 ore questa temperatura minima.

Completamente monouso e composta da materiali naturali, Ready-Heat II non danneggia l'ambiente ed è smaltibile, dopo l'uso, come normale rifiuto ospedaliero.

Ready-Heat MINI - Di dimensioni più contenute si adatta a molteplici usi, ed è caratterizzata dalla presenza di due fasce elastiche con attacco a Velcro che permettono, ad esempio, di utilizzarla come sistema di riscaldamento per le sacche di liquidi da infusione.



Caratteristiche di Ready-Heat II e Ready-Heat MINI:

Buste ad apertura facilitata
Radiotrasparente
Latex free

Uso semplice ed intuitivo
Imbustato singolarmente
Marcato CE

Codice	Descrizione	Dimensioni	Peso	Confezione
EMI 200-500	Ready_Heat II Coperta	86 x 122 cm.	680 gr.	8 pz.
EMI 200-501	Ready-Heat MINI	40x45 cm.	200 gr.	24 pz.

IMPORTATORE ESCLUSIVO PER L'ITALIA:

EMIMED TECH S.r.l.

Website: www.emimed.it – Email: info@emimed.it

Via Gramsci 104/F – 42124 Reggio Emilia

Tel. 0522/515306 – Fax 0522/0131162

Distribuito da: